

Pipette Controller



BS400203

Caratteristiche:

1. Impugnatura ergonomica, e facilità d'uso
2. Controllo preciso del pipettaggio
3. Robusto e leggero
4. Copre tutte la gamme di volumi e gradazioni delle pipette, di plastica o di vetro. Da 0,1 a 100 ml
5. Filtro intercambiabile
6. Facile da conservare e da pulire
7. Aspirazione e espulsione sono controllati con una semplice leva


Features:

1. Comfortable and simple to use.
2. Precise pipetting control
3. Robust and lightweight
4. Fits the entire range of volumetric and graduated pipets, both glass and plastic, from 0.1 to 100ml.
5. Uses replaceable 0.45µm filter
6. Easy to maintain and clean
7. Filling and delivery are easily controlled with a small sensitive lever.

BS400200 - Pipetting AID

- Copre tutte la gamme di volumi e gradazioni delle pipette, di plastica o di vetro. Da 0,1 a 100 ml
- Utilizzabile con una sola mano
- Leggera e resistente, disegnato per ottenere la massima ergonomia
- Regolazione automatica della velocità di aspirazione ed espulsione
- Batteria al lithium ricaricabili
- Indicatore del carico della batteria
- Aspira 50 ml in 5 secondi

- a full volume range: from 0,1 to 100ml pipettes
- easy to operate
- lightweight, ergonomic design allows longer, fatigue-free pipetting
- self-regulate the aspirate and dispense speed by circuit feedback
- lithium-ion battery offers long runtime per charge and no battery memory problems
- low battery indication
- fills 50ml pipet in 5 seconds

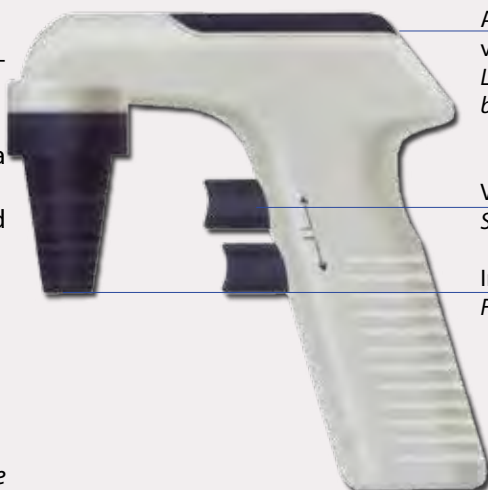

Amplio schermo LCD, fornisce lo stato della batteria e la velocità di aspirazione.

Large LCD display provides visual confirmation of remaining battery charge and speed setting.

Velocità di aspirazione ed espulsione separati.

Separate aspirate and dispense speed controls.

Interamente autoclavabile.

Fully autoclavable.



Technical Specifications

Velocità di Aspirazione / Aspirate speeds	8
Velocità di rilascio / Dispense speeds	8 + Gravità / 8 + Gravity Dispense
Batteria / Battery	Lithium-Ion
Durata della Batteria / Battery service life	20 ore di lavoro continuo / 20 Hours of continuous use
Tempo di ricarica / Charging time	Circa 2 ore / Approx. 2 Hours
Tipo di Pipette / Pipet types	Pipette in Vetro o in plastica (0,1 - 100ml) - Glass or plastic pipets(0,1-100ml). Pasteur pipets
Filtro / Filter	Idrofobo autoclavabile 0,45µl - Hydrophobic autoclavable 0,45µm

